



O C C I F L E X TM

BY ENRAF - NONIUS

DE GEAVANCEERDE EN VEILIGE
OPLOSSING VOOR NEK- EN HOOFDPIJN

OCCIFLEX



DE COMFORTABELE OPLOSSING VOOR NEK- EN HOOFDPIJN





*“EEN
ONGELOFELIJK
RESULTAAT NA
SLECHTS EEN
PAAR SESSIES!”*



DE COMFORTABELE OPLOSSING VOOR NEK- EN HOOFDPIJN

Ongeveer 15% van de wereldbevolking lijdt aan nekpijn en hoofdpijn, zoals migraine en spanningshoofdpijn. Traditionele behandelingen zijn vaak tijdrovend en, vooral bij gebruik van medicatie, duur en ondoeltreffend met kans op ongewenste bijwerkingen. Nekmobilisatie blijkt echter een effectieve behandeling te zijn voor het verminderen van chronische nek- en hoofdpijn. De methode is comfortabel en heeft geen bijwerkingen. Het succes wordt vergroot als de bewegingen constant en langzaam zijn en worden herhaald gedurende een langere periode. De Occiflex™ is uiterst geschikt voor deze behandeling.

HET VERBETEREN VAN MOBILISATIE IN HET MIDDEN VAN HET BEWEGINGSBEREIK



- ✓ GEEN BIJWERKINGEN
- ✓ VEILIG
- ✓ EENVOUDIG TE IMPLEMENTEREN
- ✓ COMFORTABEL
- ✓ EFFECTIEF
- ✓ VERGROOT UW EXPERTISE

De Occiflex™ is het eerste computergestuurde systeem voor het reproduceren van de bewegingen die worden gemaakt bij uw nekmobilisatietherapie. De Occiflex™ is veilig, comfortabel, eenvoudig te gebruiken voor mobilisatietherapie die doeltreffend is voor het verbeteren van het bewegingsbereik van de patiënt en het ombuigen van de sensitiviteit van het centrale zenuwstelsel. Manuele therapie wordt vaak te kort gegeven en het risico bestaat dat de bewegingen te geforceerd, snel, groot en zelfs schokkerig worden als de therapeut vermoeid raakt. Occiflex™ neemt dit risico weg door het automatiseren van de mobilisatiebewegingen, zodat de behandeling doeltreffender wordt en langer kan duren.

DE OCCIFLEX™ REPRODUCEERT UW THERAPIE, UW EXPERTISE!



*“DE OCCIFLEX™ DOET
PRECIES WAT IK WIL
– MET UITSTEKENDE
RESULTATEN”*



UW INTAKE, UW BEHANDELING

VERGROOT ROM, VERMINDER PIJN

De Occiflex™ behandeling is comfortabel dankzij de voorzichtige, langdurige herhaling waarbij het centrale zenuwstelsel van de patiënt wordt teruggebracht naar een natuurlijke, pijnvrije fysiologische toestand. En aangezien de mobilisatie zeer nauwkeurig is, kunnen de nekspieren op een gegeven moment makkelijker terugkeren naar de oorspronkelijke, fysiologische lengte. Het bewegingsbereik van de patiënt neemt toe en na een behandelingsperiode ervaart de patiënt minder nekpijn en daarmee gepaard gaande minder hoofdpijn - in klinische tests werd de pijn wel 48% verminderd.

NATUURLIJKE BEWEGINGEN- EENVOUDIG TE REGISTREREN

De Occiflex™ stimuleert beweging in alle richtingen en biedt een werkelijke simulatie van fysiologische beweging. Bij de eerste sessie draagt de patiënt een bewegingssensor die zowel de objectieve gegevens als uw professionele bevindingen bij het bepalen van het beste mobilisatietraject registreert. Terwijl het hoofd van de patiënt in de verstelbare hoofdsteun rust, reproduceert de Occiflex™ het traject, waarbij de bewegingen die u maakt worden gekopieerd met zes vrijheidsgraden (6DoF): drie assen van rotatie en drie richtingen van translatie. De Occiflex™ kan dan automatisch het traject, dat u tijdens een volledige 20-minutensessie maakte, herhalen met een zeer lage en constante snelheid.



***MET DE OCCIFLEX™ KUNT U UW PATIËNTEN
LANGDURIGE MOBILISATIE IN HET MIDDEN VAN HET
BEWEGINGSBEREIK BIEDEN VOOR HET BEHANDELEN
VAN CHRONISCHE NEK- EN HOOFDPIJN***

MEETBARE RESULTATEN

De Occiflex™ kan vooruitgangsverlagen genereren met betrekking tot de pijnvermindering van een patiënt, gebaseerd op de Numeric Rating Scale, Neck Disability Index, CROM test en Headache Impact Test. Deze verslagen geven de patiënt en de betrokken artsen objectieve en heldere feedback over de behandelingsresultaten. En als de CROM van de patiënt verbetert, kunt u de mobilisatiebehandeling gemakkelijk aanpassen voor het verbeteren van beweging en bereik en kunt u deze nauwkeurig aanpassen aan de behoeftes van de patiënt.

De Occiflex™ is ontworpen voor iedereen die nek- en hoofdpijn behandelt, waaronder:

- › Pijn- of hoofdpijnspecialisten
- › Revalidatie-experts
- › Orthopedisch chirurgen
- › Osteopaten
- › Chiropractors
- › Fysiotherapeuten
- › Manuele therapeuten



A woman with blonde hair is lying back in a medical chair, looking upwards. She is wearing a black tank top with white trim. The chair has a white and blue control panel on the left side. The background is a plain, light-colored wall.

*“IK HEB EINDELIJK
GEEN MEDICATIE
MEER NODIG!”*

LAAGDREMPELIGE, ONTSPANNENDE EN EFFECTIEVE MOBILISATIEBEHANDELING

PATIËNT-INDICATIES

De Occiflex™ behandeling kan nekpijn door whiplash, cervicale radiculopathie en myelopathie, cervicogenische hoofdpijn, chronische migraine en chronische spanningshoofdpijn en geïsoleerde mechanische nekpijn verminderen. De behandeling is ook doeltreffend bij cervicale blokkades en het behandelen van een slechte houding, proprioceptie en het verbeteren van spier- en gewrichtsfuncties.

GEEN BIJWERKINGEN

De bewegingen die de Occiflex™ maakt hebben een lage snelheid, zodat sommige patiënten in klinische tests nauwelijks doorhebben dat hun hoofd wordt bewogen. Dit verminderde hun angst om te bewegen en zorgde ervoor dat ze zich konden ontspannen. Door de combinatie van langzame mobilisatie en ontspanning verdwenen mogelijke bijwerkingen als misselijkheid en duizeligheid, en er kon zodoende een beter bewegingsbereik worden behaald - met veel minder pijn.

DE OCCIFLEX

- ✓ EFFECTIEF
- ✓ COMFORTABEL
- ✓ VEILIG
- ✓ BETROUWBAAR

COMFORTABEL EN VEILIG

Comfort en veiligheid zijn essentieel in het ontwerp van Occiflex™. Het hoofd van de patiënt wordt voorzichtig ondersteund, maar niet vastgezet. En aangezien de Occiflex™ erg langzaam beweegt, kunnen de patiënten hun hoofd optillen of zelfs gaan zitten als dat nodig is. Dit geeft patiënten een beter gevoel van controle en zorgt ervoor dat ze zich goed kunnen ontspannen tijdens de behandeling, voor een beter resultaat.

***DE OCCIFLEX™ BEWEEGT UITERST LANGZAAM,
HETGEEN DE BEHANDELING UITERST
ONTSPANNEND MAAKT***



I F L E X



*“IK HEB VEEL
NIEUWE CLIËNTEN
DANKZIJ DE
OCCIFLEX™”*



DE OCCIFLEX™ LAAT UW BUSINESS MET HET BEREIK VAN UW EXPERTISE GROEIEN

LAAT HET BEREIK VAN UW EXPERTISE GROEIEN

De Occiflex™ neemt u het werk uit handen: u kunt de patiënt met een gerust hart achterlaten tijdens de Occiflex™ behandeling en aandacht schenken aan andere patiënten, waardoor de productiviteit van uw praktijk toeneemt. De tijd die u besteedt aan een patiënt wordt verkort tot tijd die u nodig heeft voor het onderzoek en het instellen van de mobilisatiebehandeling. En aangezien uw reputatie als expertisecentrum voor nek- en hoofdpijn zal worden verbreid, kunt u meer cliënten verwachten.

LAAT UW BUSINESS GROEIEN

Gemiddeld genomen betreffen nek- en hoofdpijn 10% van de behandelingen die in een reguliere praktijk gegeven worden. Het potentieel van Occiflex™ is zodoende substantieel. Wanneer u het tarief voor manuele therapie hanteert, verdient het apparaat zichzelf in drie jaar terug. Aangezien de Occiflex™ behandeling


kan worden voortgezet zonder uw tussenkomst, kunt u langere sessies bieden met beperkte inzet en kosten van uw kant.

DE OCCIFLEX™ LEVERT U TIJD OP

De terugverdienperiode kan drastisch worden verkort indien u een persoonlijke bijdrage rekent voor een Occiflex™ behandeling. U biedt de optimale, comfortabele oplossing voor nek- en hoofdpijn – tegen een schappelijk tarief.

DE OCCIFLEX

- ✓ VERGROOT HET BEREIK VAN UW EXPERTISE
- ✓ STELT U IN STAAT MEER PATIËNTEN TE BEHANDELEN
- ✓ LAAT UW BUSINESS GROEIEN

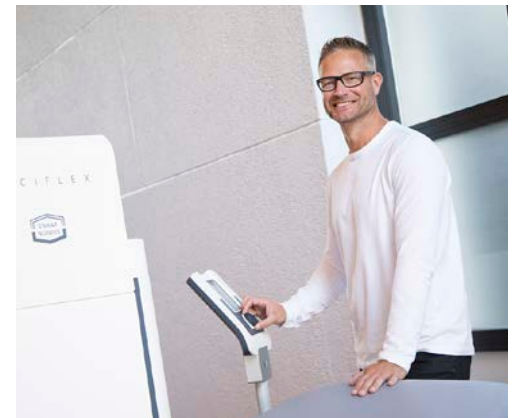



OCCIFLEX





TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen (l x b x h):	220 x 110 x 145 cm
Maat tafelblad (l x b):	185 x 79 cm
Minimum werkruimte (l x b):	270 x 150 cm
Aanpassing hoogte:	65 - 88 cm
Kantelbereik:	+10 graden (tafelhoogte 70 - 83 cm)
(afhankelijk van tafelhoogte):	-5 graden (tafelhoogte 75 - 85 cm)
	0 graden bij min. of max. tafelhoogte
Tilcapaciteit:	200 kg
Stroomvoorziening:	100-240V ~ 50/60 Hz, max 320VA
Gemiddeld verbruik:	2.0 A max.
Display:	LCD/TFT touchscreen kleurendisplay (met achtergrondverlichting)
Computer:	De Occiflex™ wordt geleverd met een eigen en voorgeïnstalleerde pc

ONTWIKKELD DOOR UW PARTNER FOR LIFE

De Occiflex™ is ontwikkeld door Enraf-Nonius, uw partner voor ultramoderne medische producten. Onze producten worden ontwikkeld in samenwerking met experts en uitvoering getest met klinisch onderzoek, zodat u verzekerd bent van kwaliteit en effectiviteit.



OCCIFLEX







O C C I F L E X TM
BY ENRAF - NONIUS



PARTNER FOR LIFE

Enraf-Nonius B.V. | Vareseweg 127 | 3047 AT Rotterdam | Nederland

 www.occiflex.com  info@enraf-nonius.nl  +31 - (0)10 20 30 600